


APLICADOR DE CLIPS DE TITANIO TIPO LT300


La grapadora endoscópica lineal cortante es adecuada para la escisión, transección y anastomosis de tejido durante la cirugía endoscópica en cirugía abdominal, ginecología, pediatría y cirugía torácica.

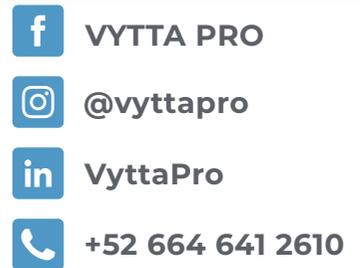

Códigos

Medidas

801.001.1	L	10mmx33cm
801.001.2	M	10mmx33cm
801.001.3	L/M	10mmx33cm

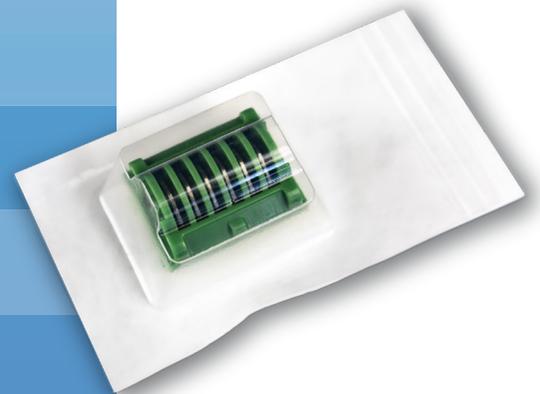

Tipo Acción única

Material Acero inoxidable

ISO 13485
Certificado EC

Reutilizable



- Diseñado para el **CONTROL EFICAZ** del sangrado.
- Garantiza la **APLICACIÓN SEGURA Y PRECISA** de clips de titanio.
- Cuenta con un **MANGO ERGONÓMICO.**
- **ROTACIÓN COMPLETA.**
- **PUERTO DE DESCARGA** para la limpieza.

Características de diseño avanzado

Tissue Stop: Minimiza el contacto entre la copa y el clip para reducir la posibilidad de que el clip se desprenda de las mandíbulas.

Pestaña de alimentación de clips: Facilita la alimentación de clips y proporciona estabilidad durante el ciclo de disparo.

Mecanismo de trinquete anti-retroceso: evita que las interrupciones en la secuencia de disparo afecten la estabilidad de la mandíbula.

Mecanismo de alimentación de accionamiento directo: permite un avance y colocación del clip suave y controlado.



Dedos aplicadores diseñados para servir de guía

Para facilitar la carga de cada clip en el aplicador. Después de cargar, los dedos permanecen en posición hacia abajo para indicar que el clip se ha cargado.



801.001.1



801.001.2



801.001.3